

您的选择毋庸置疑

我们提供专业的解决方案和长久优质的服务
更高需求请体验 V200 / V300 的优势



苏州公理福医疗器械有限公司

中国苏州市吴中区苏蠡路85号

销售直线: 0512-65657985

传真: 0512-65657985 / 0512-65623770

www.gonglifu.com – mail : victor@victordentalequipment.com



意大利赛福徕牙科集团

Cefla Dental Group provides state-of-the-art solutions for

dent

al

o

professionals

the

wor

ld

over.

Cefla - Via Selice Provinciale, 23/a

40026 Imola - Bo - (Italy) www.cefladentale.com

V100





公理福

不同寻常

- V100 传承了悠久的中国品牌的优良传统，同时由于意大利团队的专心设计，以及对整个生产流程都应用了精益生产原理更是让 V100 的价值得到了充分的体现。生产流程获得了 ISO 13485 和 ISO 9001 认证。
- V100 采用动态压缩气控系统，方便高效，保证了牙医在各种情形下的安全操作。
- 区别于行业内部分产品，V100 机体内均采用优质元器件材料，经久耐用，无刺鼻异味，无毒无害。
- V100 操作简便、实用性强，只要您使用一次，就会深有体会，爱不释手。



V100

传统式下挂控制台与轻松自如的
欧式上挂控制台任由选择，同样
的灵活性与器械升级空间；产品
具有欧洲先进的设计与技术。



U100

世界性设计

风格延续



靠背采用薄型设计，曲线轮廓的背部有更多的腿部活动空间；
医生在低椅位操作时更易保持舒适姿势。

V100

世界性设计

与生俱来的品质

- V100 是稳固的传统工艺与现代尖端技术结合的产物，其设计杰出且实用。其流畅的线条规定了特别选取的材料的强度和容量等几何要求，为综合治疗机提供了高度的稳定性。
- 电和机械控制的病人座椅具有两个预设编程位置，以及四个可由使用者自定义编程的位置。这些设计使病人的舒适度达到最大化，也让医护工作者用起来更方便。
- 可旋转的扶手使患者坐、起自如。
- 医师椅十分稳固并可调节高度，可独立旋转的靠背更适合医护两用。
- 无缝吸附卫生软垫，易清洁，防积污。人体工程设计也包括了腿部成型板块，减少患者的压迫点，增加舒适感。



U100

问题洞察力

发现和消除疑惑



无影灯开口式手柄利于卫生防护

V100

问题洞察力

转变为您的需要

- 只要使用过 V100，您就会认为它是您正确的选择。器械含有防回吸装置系统。上挂式器械盘移动起来自由顺畅，非常符合人体工程学。主体箱可以从两侧打开，升级维护非常方便。
- 上挂式器械盘的器械使用时十分方便流畅，减少了手腕的压力，同时消除了在使用时器械盘的任何干扰。
- 主体箱可转动位置，为助手提供更大的空间，并使常规维护保养更加方便，清洁治疗环境卫生更容易。
- 因为主体箱两侧都能打开，所以保养、清洁以及升级其他硬件器械、检查净水瓶水位时都非常方便。



100

事实胜于雄辩

时刻都在进步和提高




V100

事实胜于雄辩

简单直接

- V100 的气动系统简单高效、可靠性高、耐用性高。一个开关可以控制电水气，只要轻轻一拨开关就可以工作。
- 病人座椅的运动具体科学人性化安全系统 :1、一旦座椅或靠背遇障碍物，椅子会立刻停止运动，防止座椅继续往下出现挤压事故。2、治疗机手机工作时，牙椅运动电路安全自锁。
- 医生治疗台和助手治疗台都有各自的控制面板，可以控制病人座椅的运动和整个系统的运行，医生治疗台有五组器械挂架。气刹系统，使医生治疗台能灵活移动，并且准确定位。
- 只要一只手就可以调整头枕位置，给病人的头部进行完美的定位，快速简单。
- 多功能脚控可以控制水气以及开启 / 关闭手术灯，实现单喷水、单喷气，减少器械切换的麻烦，有效节约工作时间，防止交叉感染。
- 助手治疗台包括：优质三用枪，强吸和弱吸及升级器械位。

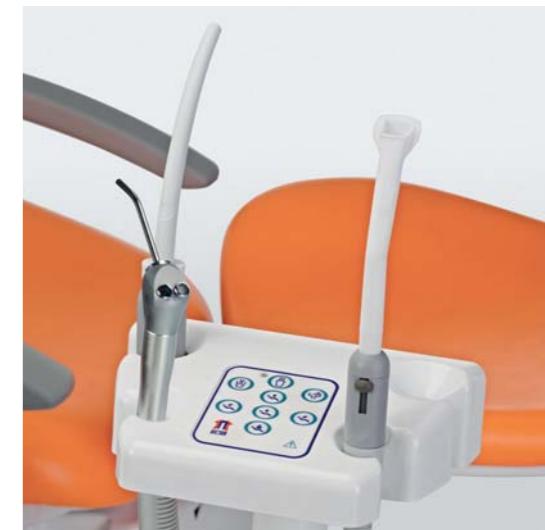

100

确信的理由

底线原则




V100

确信的理由

安全可靠

- 拥有 V100, 安全在手 :设计牙椅时卫生系统是首先考虑的问题。我们设备采用的系统从源头上限制了污染的风险 ,从而最有效的抑制细菌的扩散。
- 防回吸装置阻止了遗留在器械上的水滴回吸 ,以防交叉感染。
- 我们设计的很多部件清洁起来都很方便。器械盘上的硅胶托盘垫和器械挂架垫都可进行高温消毒。注水头可拆卸清理消毒 ,痰盆由陶瓷制成 ,耐高温、抗腐蚀。
- 整个牙科综合治疗机的表面包括皮垫都可用特殊的清洁剂清洗。医生治疗台的前盖可以拆下进行彻底清洁。
- 安装在主机内部的大容量压力水瓶用于必要的卫生需求时的独立供水 ,可以轻易地从底部拆下。

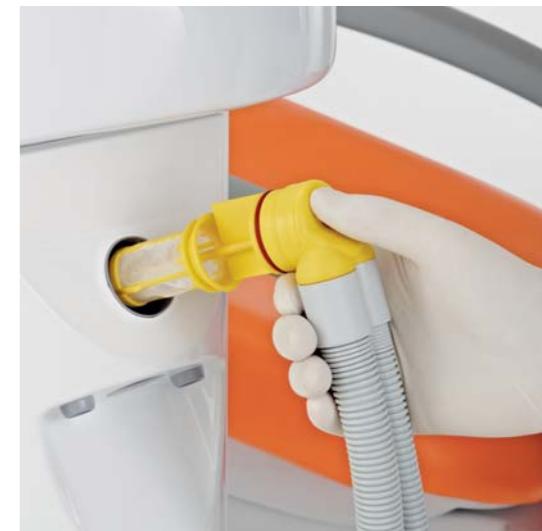

V100 | 附加值

多种可选配置

- 可以连接抽吸的相关组件
- 梅合金和液体分离组件
- 压电超声波或气动洁牙机
- 光固化机
- 光纤器械组件

多媒体

包含了多媒体系统内窥镜和享有国际质量保证的显示器



技术规格

电压: 230V AC/115VAC, 50 Hz/60 Hz

水压: 0.20-0.40 Mpa/ 2.0-4.0 bar

气压: 0.55-0.8 Mpa/ 5.5-8.0 bar

V100 | 风格

选择您希望的皮垫颜色

